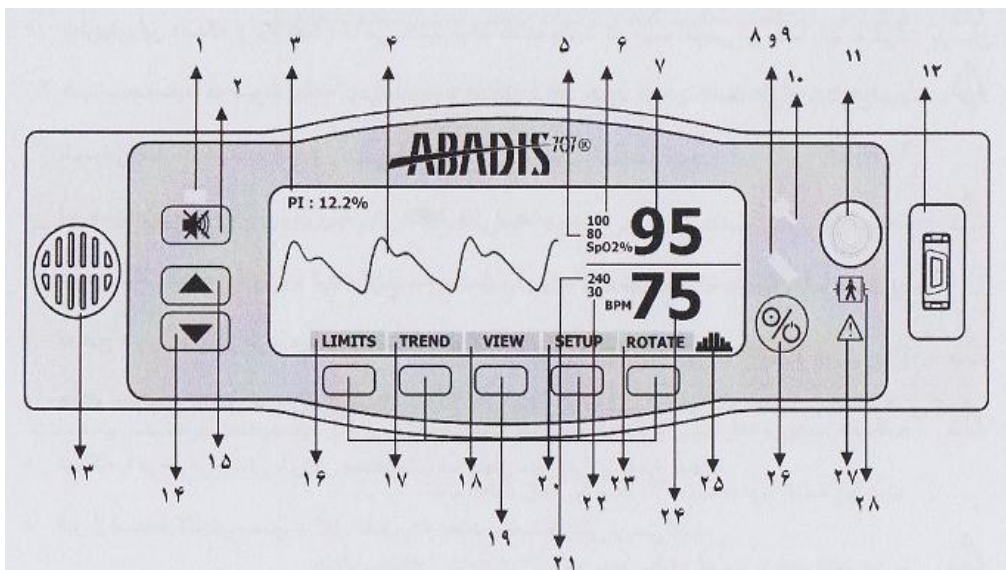





## راهنمای دستگاه پالس اکسیمتر ABADIS

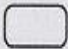


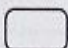


کلید جهت بالا	۱۵	LED هشدار مربوط به قطع آلارم ها	۱
منوی حدود آلارم ها	۱۶	کلید قطع آلارم ها برای مدت محدود	۲
منوی TREND	۱۷	نشانگر میزان PERFUSION INDEX	۳
منوی تنظیم نور و کنتراست	۱۸	منحنی PLETHYSMOGRAPH	۴
کلیدها	۱۹	حد پایین مربوط به آلارم SpO2	۵
منوی تنظیمات دستگاه	۲۰	حد بالای مربوط به آلارم SpO2	۶
حد بالای مربوط به آلارم PULSE	۲۱	نشانگر میزان SpO2%	۷
حد پایین مربوط به آلارم PULSE	۲۲	LED هشدار مربوط به اتصال باطری (سبز رنگ)	۸
چرخش صفحه برای کار در حالت عمودی	۲۳	LED هشدار مربوط به دشارژ باطری (قرمز رنگ)	۹
نشانگر میزان PULSE	۲۴	LED هشدار مربوط به اتصال به کابل برق	۱۰
نشانگر قدرت سیگنال دریافتی	۲۵	محل اتصال کانکتور دما	۱۱
کلید روشن / خاموش	۲۶	محل اتصال کانکتور پالس اکسیمتر	۱۲
هشدار برای مراجعه به مدارک همراه	۲۷	محل پخش هشدار صوتی	۱۳
اجزاء کاربردی نوع BF	۲۸	کلید جهت پایین	۱۴

برای روشن شدن دستگاه، کلید  را ۲ ثانیه نگهداشته شود.

برای خاموش کردن دستگاه، کلید  تا ۴ ثانیه نگهداشته شود.

از کلید  جهت قطع موقت هشدارهای صوتی استفاده کنید.

برای انتخاب منوها و تغییر مقادیر تنظیمات از کلیدهای منوی تنظیمات  استفاده کنید.

برای جابجایی در منو و کاهش مقادیر تنظیمات از کلیدهای منوی تنظیمات  و  و  استفاده کنید.

کلید **LIMITS** برای تنظیم حد بالا و پایین هشدارهای دستگاه مربوط به دو فاکتور **PULSE** و **SpO2** می باشد.

با فشار دادن کلید **TREND** می توانید وارد منوی مربوط به ثبت اطلاعات بیمار در بازه زمانی تنظیم شده شوید

کلید **VIEW** برای تغییر در کنتراست صفحه نمایش و شدت نور پیش زمینه استفاده می شود.

از کلید **SETUP** جهت ورود به منوی تنظیمات استفاده کنید.

برای استفاده از دستگاه بصورت عمودی کلید **ROTATE** را فشار دهید.

برای قطع جریان برق از دستگاه می توانید از کلید خاموش- روشن که در پشت دستگاه قرار دارد استفاده کنید.