


## راهنمای کاربری سریع پالس اکسی متر Criticare مدل ۵۰۴

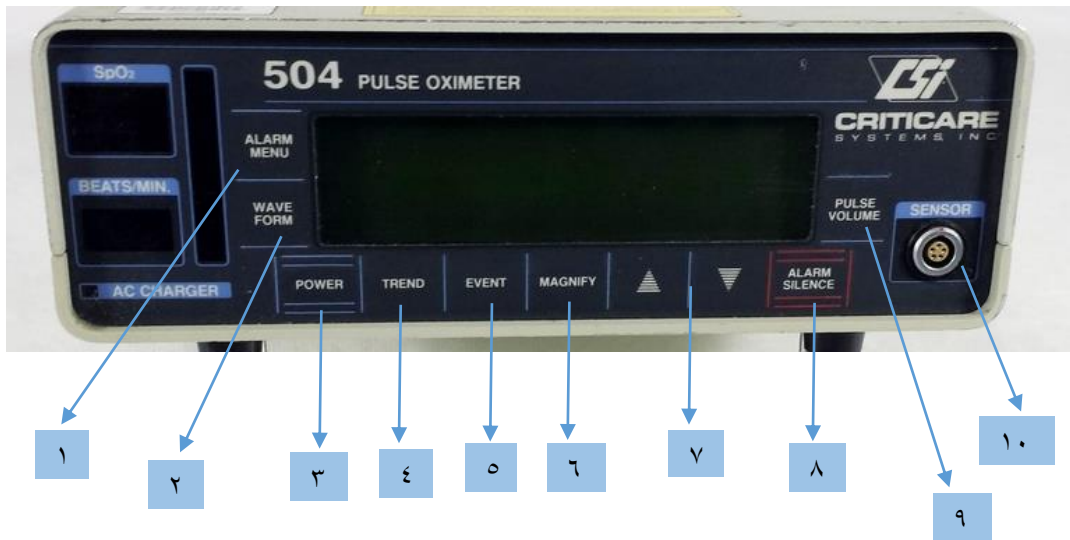

<p>۲- شکل موج یکبار فشردن کلید: نمایش شکل موج پالس دوبار فشردن کلید: نمایش شکل موج EKG سه بار فشردن کلید: نمایش شکل موج و EKG</p>	<p>۱- منوی نمایش آلارم‌ها</p>
<p>۴- نمایش داده‌های ذخیره شده یکبار فشردن کلید: Oxygen Saturation دوبار فشردن کلید: Pulse Rate سه بار فشردن کلید: PR و SPO<sub>2</sub></p>	<p>۳- کلید پاور</p>
<p>۶- افزایش سایز شکل موج هنگام نمایش شکل موج</p>	<p>۵- ثبت مارکر رویداد خاص در قسمت Trend</p>
<p>۸- غیرفعال کردن آلارم برای مدت ۲ دقیقه</p>	<p>۷- کلید حرکتی بالا و پایین روی صفحه نمایش</p>
<p>۱۰- محل اتصال پروب پالس اکسی متر</p>	<p>۹- غیرفعال/تنظیم صدای PR</p>